


MONTAGEANLEITUNG

ROLLSTÄNDER ULTRA-LIGHT DUTY

ASSEMBLY INSTRUCTION

CART ULTRA-LIGHT DUTY

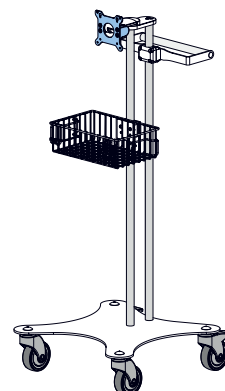

Name: CIM Rollständer Ultra-Light Duty
Artikelnummern-Code des Rollständers: R-003
Artikelnummern-Code der Geräteaufnahme: A, FK, G, PH

Name: CIM Cart ultra-light duty
Part no. code of the cart: R-003
Part no. code of the monitor adaptation: A, FK, G, PH

WARNHINWEISE

Überprüfen Sie das Gewicht des zu befestigenden ME-Gerätes. Die zulässige Gewichtsbelastung finden Sie auf dem entsprechenden Produktdatenblatt.

Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu Geräteschäden oder Verletzung von Personen führen.

Die CIM med GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht fachgerechte Montage entstanden sind.

Veränderungen am Produkt, Demontage einzelner Komponenten, Montage bzw. Zusammenbau der Einzelteile in anderer Form als nachfolgend beschrieben, sind nur nach ausdrücklicher und schriftlich erteilter Genehmigung durch die Konstruktionsabteilung der CIM med GmbH zulässig. Für Schäden, die durch nicht genehmigte Produktänderungen entstehen, übernimmt die CIM med GmbH keine Haftung.

Die weiterführende Gebrauchsanweisung und der Inspektionsplan sind für Endanwender bestimmt.

WARNING

Please check the weight of the ME equipment to be mounted. The permissible total weight is mentioned on the corresponding data sheet.

Failure to follow these warnings may result in damage to equipment or injury to people.

CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage due to poor installation.


Product modifications, disassembling and reassembling and/or mounting any of the components in any other way than described below are permitted only after written approval by the CIM med GmbH construction and engineering department. CIM med GmbH cannot be held responsible for any damage or injury caused by product modifications and/ or amendments without prior permission from CIM med GmbH.

The additional instructions for use and the inspection plan are intended for end users.

MONTAGESCHRITTE

MONTAGESCHRITTE


1. Schrauben Sie die Verbindungsplatte mit den (6) M5x30 Linsenkopfschrauben auf die beiden Rundrohrprofile.
2. Montieren Sie nun die Monitoraufnahme mittels der (4) M5x20 Senkkopfschrauben.

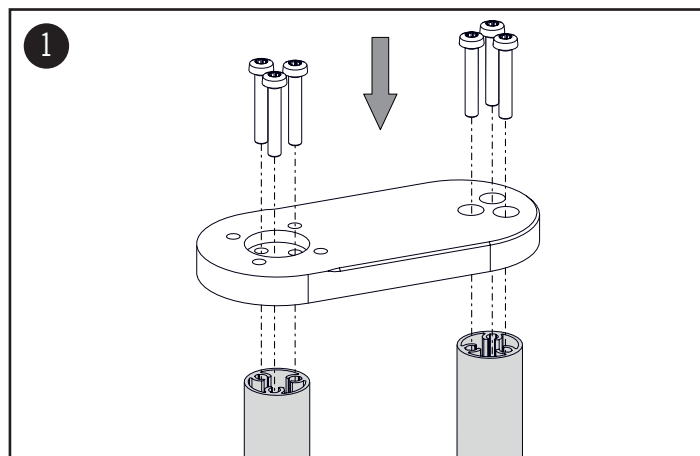

3. Befestigen Sie das Zubehör an dem jeweiligen Rundrohrprofil in der gewünschten Höhe.

HINWEIS: Bitte beachten Sie die Montageanleitungen des jeweiligen Zubehörs.


4. Montieren Sie die beiden Rundrohrprofile mit den (6) M5x30 Linsenkopfschrauben an das Fußkreuz. Ziehen Sie die Schrauben fest an.

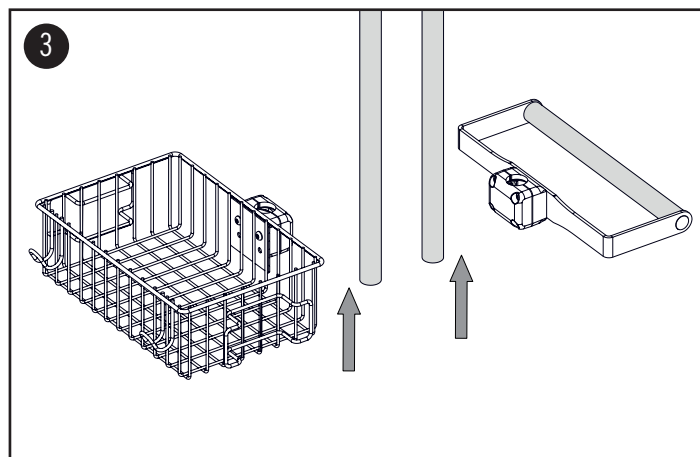

ASSEMBLY STEPS

ASSEMBLY STEPS


1. Mount the connection plate with the (6) M5x30 pan-head screws to the two poles.
2. Mount the monitor adaption with the (4) M5x20 countersunk screws.

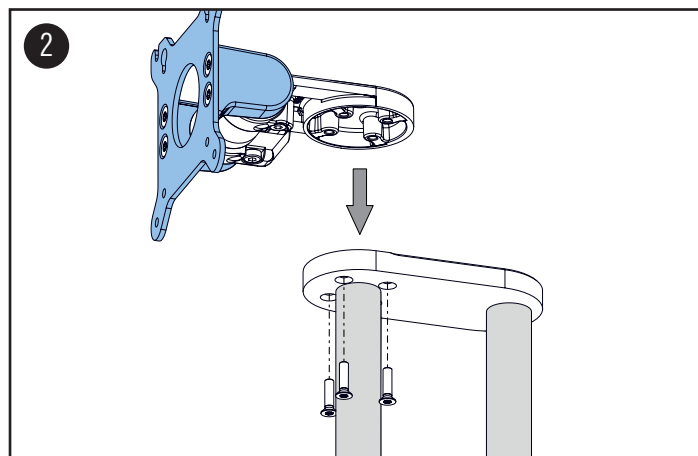

3. Attach the accessory to the relevant pole at the desired height.

NOTE: Please refer to the corresponding assembly instruction of the accessory.

4. Mount the two poles to the base with (6) M5x30 pan-head screws. Tighten the screws securely.

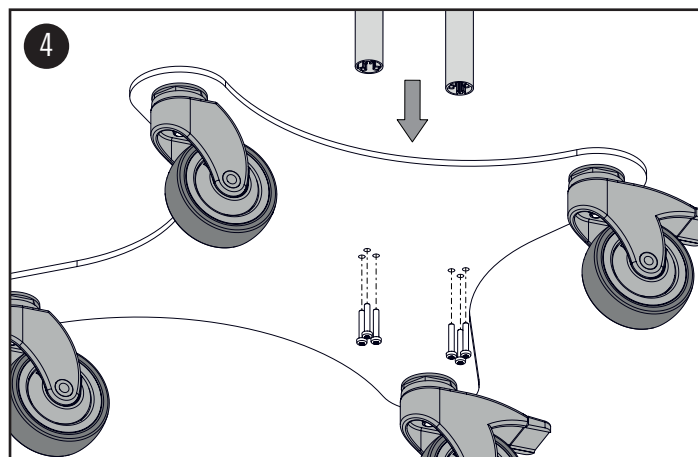

MONTAGESCHRITTE


EINSTELLUNG DER SCHWER-/ LEICHTGÄNGIGKEIT DER NEIGEFUNKTION

- Die Schwer- bzw. Leichtgängigkeit der Neigefunktion lässt sich durch Festziehen bzw. Lösen der beiden Innensechskantschrauben individuell einstellen. Durch Festziehen beider Schrauben lässt sich die Neigung komplett blockieren. Maximal erlaubtes Anziehmoment 8 Nm.

⚠ ACHTUNG: Bei zu starkem Anziehen der Schraube kann das Gussteil bzw. Gewinde brechen und führt zu Funktionsverlust.

⚠ ACHTUNG: Beim Lösen beider Schrauben besteht die Gefahr des Herunterklappens des ME-Gerätes.

⚠ GEFAHR DER FINGERQUETSCHUNG

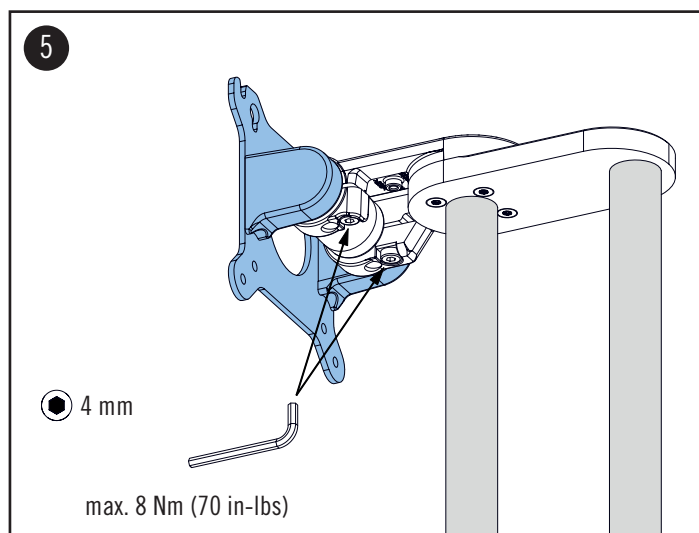

ASSEMBLY STEPS

TILT ADJUSTMENT

- To adjust the overall tilt tension, tighten or loosen the both hex screws. By tightening both of the screws the tilt function can be locked completely. Maximum permissible tightening torque is 8 Nm (70 in-lbs).

⚠ WARNING: In case of overtightening the screw the casting repectively the threads may break which leads to loss of function.

⚠ WARNING: When loosening both hex screws the ME equipment will tilt forward.

⚠ DANGER OF SQUEEZING FINGERS