

PRODUKTÜBERSICHT

# VESA 75/100 Anbindungen

CIM Cable Integrated Mounting System



# Inhalt

---

<b>Allgemeine Hinweise</b>	<b>3</b>
<b>Erstellen von Artikelnummern</b>	<b>4</b>
<b>Produkt Highlights</b>	<b>6</b>
<b>Flush Mount</b>	<b>7</b>
<b>Tragarm Pivot</b>	<b>9</b>
<b>Dreigelenkarm Light</b>	<b>11</b>
<b>Dreigelenkarm</b>	<b>13</b>
<b>Höhenverstellbarer Tragarm</b>	<b>15</b>
<b>Höhenverstellbarer Dreigelenkarm</b>	<b>17</b>
<b>Höhenverstellbarer Tragarm für hohe Montageposition</b>	<b>19</b>
<b>Höhenverstellbarer Dreigelenkarm für hohe Montageposition</b>	<b>21</b>
<b>Tischträger</b>	<b>23</b>
<b>Tischträger für tiefe Bildschirme</b>	<b>25</b>
<b>Rollständer Light Duty</b>	<b>27</b>
<b>Befestigungsmöglichkeiten</b>	<b>29</b>
<b>Befestigungsmöglichkeiten für Anästhesiegeräte</b>	<b>30</b>

## Allgemeine Hinweise

---

### Monitoraufnahme

Die Monitoraufnahme VESA 75/100 steht in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung:

- Standard VESA 75/100
- VESA Aufnahme drehbar (Portrait-Landscape Anwendung)
- VESA Aufnahme mit Quick Release zur schnellen Demontage (siehe Katalog: VESA 75/100 Anbindungen mit Quick Release)

### Komponentenerdung

Alle Tragarme mit integrierter Kabelführung sind mit einer **Komponentenerdung** versehen. Bei externer oder teil-integrierter Kabelführung, bei der keine Kabel durch die Gelenke geführt werden, kann auf die Komponentenerdung verzichtet werden.

### Gewichtsbelastung

Alle **höhenverstellbaren** Tragarme haben eine maximale Gewichtsbelastung von 22 kg. Bei rückseitigen Adaptionen und bodenseitigen Anbindungen mittels der 5" Montageplatte darf das Monitorgewicht maximal 18 kg betragen. Weitere 4 kg können beispielsweise über einen Down Post unterhalb des vorderen Drehgelenks befestigt werden. Je nach Material und dessen Bruchdehnung haben alle Gewichtsangaben einen 4- bzw. 6-fachen Sicherheitsfaktor gemäß den Regularien EN 60601-1, 3rd Edition.

---

### Sonderlösungen und Anwendungen im Kernspinbereich / MRI

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie **kundenspezifische** Lösungen suchen.

### Produktkennzeichnung

Alle CIM Produkte sind mit dem CE-Kennzeichen versehen. Als **Medizinprodukt der Risikoklasse 1** entsprechen sie den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG und sind konform mit den Regularien EN 60601-1, 3rd Edition. TÜV Reports für zahlreiche Produkte, v.a. im Bereich Anästhesie, bescheinigen die mechanische und elektrische Sicherheit unserer Produkte.



# Erstellen von Artikelnummern

Bitte gehen Sie bei der Konfiguration der Artikelnummern wie folgt vor:

Alle Buchstaben in grün bitte mit dem entsprechenden Artikelnummern-Code ersetzen.

## 1. Komponentenerdung:

S	=	Nicht geerdet
A	=	Geerdet

## 2. Wählen Sie die gewünschte Tragarmvariante aus:

910G / 910GS	=	Flush Mount
224G / 230G / 224GS / 230GS	=	Tragarm Pivot
33030G / 33030GS	=	Dreigelenkarm Light
H33030G / H33030GS	=	Dreigelenkarm
431G / 431GS	=	Höhenverstellbarer Tragarm
73130G / 73130GS	=	Höhenverstellbarer Dreigelenkarm
531G / 531GS	=	Höhenverstellbarer Tragarm für hohe Montageposition
83130G / 83130GS	=	Höhenverstellbarer Dreigelenkarm für hohe Montageposition

## 3. Spezifizieren Sie die Anbindung - wo wollen Sie Ihre Halterung befestigen (Y):

1V	=	Rundrohr $\varnothing$ 23 - 40 mm
1	=	Rundrohr $\varnothing$ 25 mm
1F	=	Rundrohr $\varnothing$ 35 mm
1C	=	Rundrohr $\varnothing$ 38 mm
2F	=	Horizontale Normschiene 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm
3	=	Vertikale Normschiene 10 x 25 mm
3DR	=	2 vertikalen Normschienen, Abstand 150 mm
3TX	=	2 vertikalen Normschienen, Abstand 225 mm
4V	=	Vertikaler Wandkanal
4U	=	Vertikaler Wandkanal für Tragarme für hohe Montageposition
	=	Anästhesiegeräte mit Seitenkanal
13	=	Mindray Deckenstative
17	=	Amico Deckenstative
9	=	Löwenstein Medical Anästhesiegeräte
10	=	Maquet FLOW i Anästhesiegeräte

# Erstellen von Artikelnummern

## 4. Wählen Sie die Farbe der dekorativen Kunststoffteile (C):

- gr = RAL 7024 (graphitgrau)
- bl = RAL 5013 (kobaltblau)

## 5. Wählen Sie die Farbe der Aluminiumdruckussteile (D):

- 1 = RAL 9016 (verkehrsweiß)
- 2 = RAL 9002 (grauweiß)

## 6. Spezifizieren Sie die Federstärke gem. des Monitorgewichts - nur bei höhenverstellbaren Armen (X):

- 60 = 2 - 5 kg
- 95 = 4 - 9 kg
- 130 = 7,5 - 13 kg
- 175 = 13 - 16 kg
- 220 = 16 - 22 kg

## Beispiel

01 Erdung		02 Armtyp		03 Adaption		04 & 05 Farbe		06 Federstärke
A	-	431G	-	Y	.	CD	-	X
A	-	431G	-	4V	.	gr1	-	95

## Produkt Highlights

### Nicht höhenverstellbare Tragarme

Der nicht höhenverstellbare Tragarm gewährleistet neben einer **vollständigen Kabelintegration** eine einfache Reinigung und wirkt somit dem Infektionsrisiko in kritischen Klinikbereichen entgegen. Unsere **5-jährige Gewährleistung** garantiert eine reibungslose, störungs- und wartungsfreie Handhabung. Die Drehfunktion am hinteren Schwenklager sowie eine dreh- und neigbare Monitoraufnahme sorgen für die **optimale Platzierung** Ihres Gerätes. Bei Dreigelenkarmen befindet sich ein weiteres Drehgelenk am Mittelteil zur horizontalen Positionierung. Bei bodenseitig befestigten Monitoren ist der Tragarm aus Sicherheitsgründen mit einem **20° Anschlagstopper** ausgestattet.

### Höhenverstellbare Tragarme

Der höhenverstellbare Tragarm bietet eine **vollständig integrierte Kabelführung**, leicht zu reinigende Oberflächen und eine **5-jährige Gewährleistung** auf das gesamte Produkt. Vertikal und horizontal verstellbar sorgt der Tragarm für die **optimale Positionierung** Ihres Gerätes. Ein konstanter Blickwinkel bei Höhenverstellung ist durch die Parallelführung gewährleistet. **Gewichtsangepasste Druckfedern** balancieren den Monitor gewichtsausgeglichen. Eine Einstellung bzw. Justierung der Feder ist nicht erforderlich. Bei bodenseitigen Monitoraufnahmen ist der Tragarm aus Sicherheitsgründen mit einem **20° Anschlagstopper** ausgestattet. Zusätzlich können Rotationsanschlüsse in jedem Drehgelenk für eine **individuelle Begrenzung der Schwenkbereiche** angebracht werden.

Alle höhenverstellbaren Arme verfügen über einen einfach auszulösenden Mechanismus des Vierteldrehverschlusses, der den Arm in korrekter Position hält, wenn der Monitor entfernt wird. Des Weiteren ist der Tragarm mit der Besonderheit der sich langsam ausfahrenden Druckfeder ausgestattet. Sollte versucht werden, den Monitor vor Arretierung des Tragarms zu lösen, so bewegt sich dieser lediglich langsam und mit gleichmäßigem Tempo nach oben.

Sicherheit

# Flush Mount



**Monitoraufnahme**

VESA 75/100

**Farbauswahl**

Kunststoffteile RAL 5013 kobaltblau / RAL 7024 graphitgrau  
 Aluminiumteile RAL 9016 verkehrsweiß / RAL 9002 grauweiß

**Max. Zuladung Tragarm**

18 kg

**Max. Zuladung Monitoraufnahme**

18 kg

**Eigengewicht**

1 kg

**Artikelnummer**

S-910G-Y.CD VESA 75/100  
 S-910GS-Y.CD VESA 75/100 drehbar

## Befestigungsmöglichkeiten

Y | Details Seite 29



4V

Adapter für vertikalen Wandkanal



2F

Fixe Normschienenklemme



3

Vertikale Normschienenklemme



3DR  
3TX

Vertikale Normschienenklemme 2-fach



1  
1F  
1C  
1V

Fixe / Universelle Rundrohrklemme



13

Adapter für Mindray Deckenstativ



17


Adapter für Amico Deckenstativ

# Flush Mount

## Technische Daten


---

### SEITENANSICHT

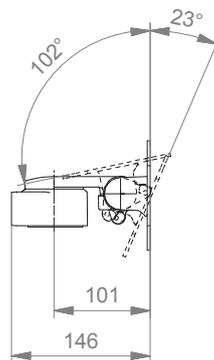


---

### DRAUFSICHT

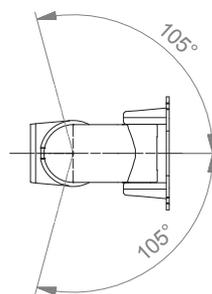

# Tragarm Pivot

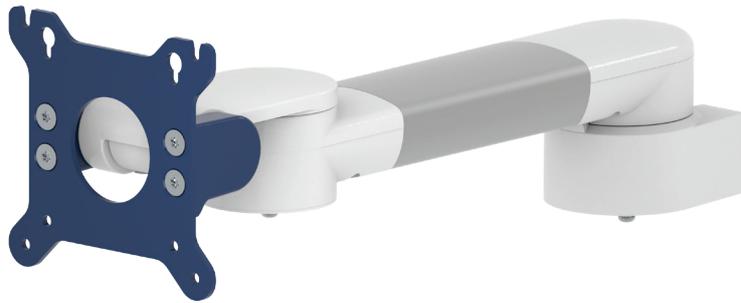

<b>Monitoraufnahme</b>	VESA 75/100	
<b>Farbauswahl</b>	Kunststoffteile	RAL 5013 kobaltblau / RAL 7024 graphitgrau
	Aluminiumteile	RAL 9016 verkehrsweiß / RAL 9002 grauweiß
<b>Max. Zuladung Tragarm</b>	18 kg	
<b>Max. Zuladung Monitoraufnahme</b>	18 kg	
<b>Eigengewicht</b>	240 mm: 1,9 kg	300 mm: 2 kg
<b>Artikelnummer</b>	Tragarmlänge: 240 mm	Tragarmlänge: 300 mm
	A-224G-Y.CD	A-230G-Y.CD
	A-224GS-Y.CD	A-230GS-Y.CD
		VESA 75/100
		VESA 75/100 drehbar

## Befestigungsmöglichkeiten

Y | Details Seite 29 und 30



4V

Adapter für vertikalen Wandkanal



2F

Fixe Normschielenklemme



3

Vertikale Normschielenklemme



3DR  
3TX

Vertikale Normschielenklemme 2-fach



1  
1F  
1C  
1V

Fixe / Universelle Rundrohrklemme



13

Adapter für Mindray Deckenstativ



17

Adapter für Amico Deckenstativ



10

Adapter für Maquet Anästhesiegeräte



9

Adapter für Löwenstein Medical Anästhesiegeräte



4U


Adapter für Anästhesiegeräte bei vorhandenem Seitenkanal

# Tragarm Pivot


Technische Daten - Armlänge 300 mm

---


SEITENANSICHT

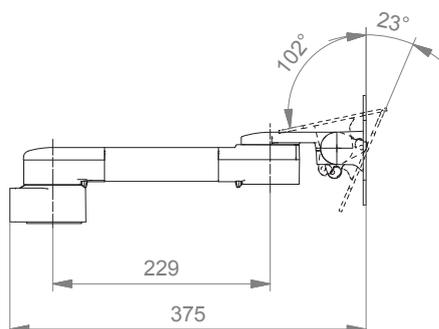

DRAUFSICHT

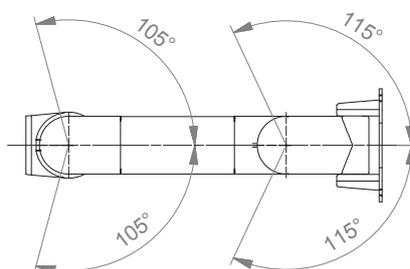

# Dreigelenkarm Light

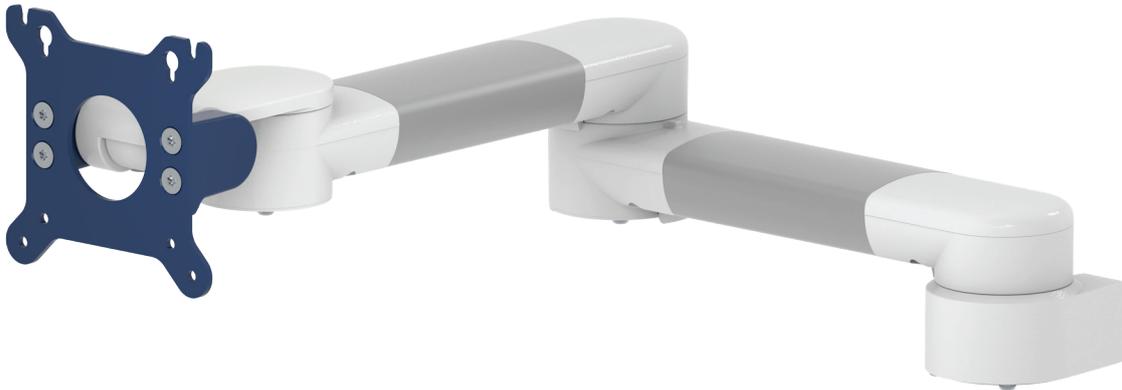

<b>Monitoraufnahme</b>	VESA 75/100	
<b>Farbauswahl</b>	Kunststoffteile	RAL 5013 kobaltblau / RAL 7024 graphitgrau
	Aluminiumteile	RAL 9016 verkehrsweiß / RAL 9002 grauweiß
<b>Max. Zuladung Tragarm</b>	8 kg	
<b>Max. Zuladung Monitoraufnahme</b>	8 kg	
<b>Eigengewicht</b>	2,8 kg	
<b>Artikelnummer</b>	A-33030G-Y.CD	VESA 75/100
	A-33030GS-Y.CD	VESA 75/100 drehbar

## Befestigungsmöglichkeiten

Y | Details Seite 29 und 30



4V

Adapter für vertikalen Wandkanal



2F

Fixe Normschielenklemme



3

Vertikale Normschielenklemme



3DR  
3TX

Vertikale Normschielenklemme 2-fach



1  
1F  
1C  
1V

Fixe / Universelle Rundrohrklemme



13

Adapter für Mindray Deckenstativ



17

Adapter für Amico Deckenstativ



10

Adapter für Maquet Anästhesiegeräte



9

Adapter für Löwenstein Medical Anästhesiegeräte



4U


Adapter für Anästhesiegeräte bei vorhandenem Seitenkanal

# Dreigelenkarm Light

## Technische Daten


---

### SEITENANSICHT

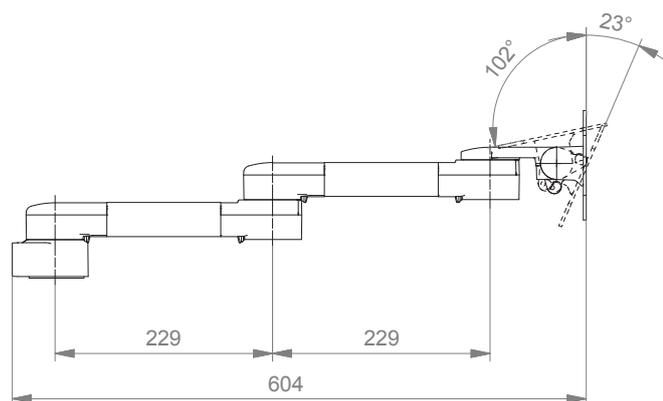

---

### DRAUFSICHT

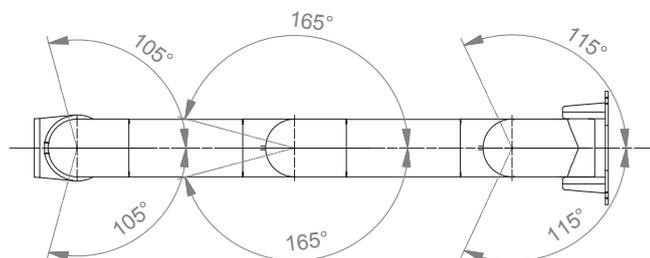

# Dreigelenkarm



<b>Monitoraufnahme</b>	VESA 75/100	
<b>Farbauswahl</b>	Kunststoffteile	RAL 5013 kobaltblau / RAL 7024 graphitgrau
	Aluminiumteile	RAL 9016 verkehrsweiß / RAL 9002 grauweiß
<b>Max. Zuladung Tragarm</b>	18 kg	
<b>Max. Zuladung Monitoraufnahme</b>	18 kg	
<b>Eigengewicht</b>	3 kg	
<b>Artikelnummer</b>	A-H33030G-Y.CD	VESA 75/100
	A-H33030GS-Y.CD	VESA 75/100 drehbar

## Befestigungsmöglichkeiten

Y | Details Seite 29 und 30



4V

Adapter für vertikalen Wandkanal



2F

Fixe Normschielenklemme



3

Vertikale Normschielenklemme



3DR  
3TX

Vertikale Normschielenklemme 2-fach



1  
1F  
1C  
1V

Fixe / Universelle Rundrohrklemme



13

Adapter für Mindray Deckenstativ



17

Adapter für Amico Deckenstativ



10

Adapter für Maquet Anästhesiegeräte



9

Adapter für Löwenstein Medical Anästhesiegeräte



4U


Adapter für Anästhesiegeräte bei vorhandenem Seitenkanal

# Dreigelenkarm


## Technische Daten

---

### SEITENANSICHT

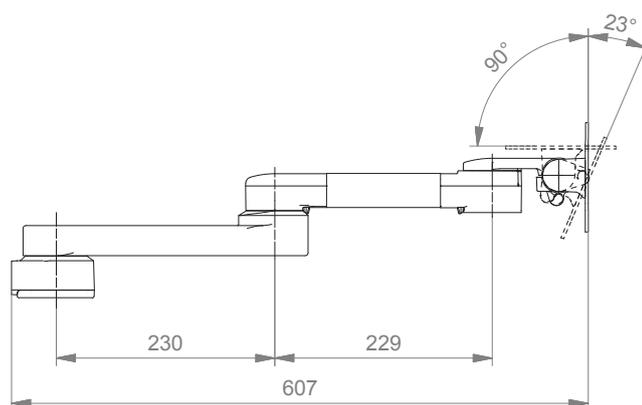

### DRAUFSICHT

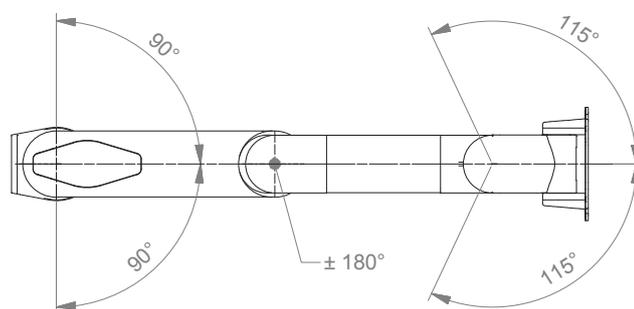

# Höhenverstellbarer Tragarm



<b>Monitoraufnahme</b>	VESA 75/100
<b>Höhenverstellung</b>	Mittels langsam ausfahrender Druckfeder
<b>Farbauswahl</b>	Kunststoffteile RAL 5013 kobaltblau / RAL 7024 graphitgrau Aluminiumteile RAL 9016 verkehrsweiß / RAL 9002 grauweiß
<b>Max. Zuladung Tragarm</b>	22 kg
<b>Max. Zuladung Monitoraufnahme</b>	18 kg
<b>Eigengewicht</b>	3,6 kg
<b>Gewichtsausgeglichener Bereich</b>	600 N (2-5 kg); 950 N (4-9 kg); 1300 N (7,5-13 kg); 1750 N (13-16 kg); 2200 N (16-22 kg)
<b>Artikelnummer</b>	A-431G-Y.CD_X                      VESA 75/100 A-431GS-Y.CD_X                    VESA 75/100 drehbar

## Befestigungsmöglichkeiten

Y | Details Seite 29 und 30



4V

Adapter für vertikalen Wandkanal



2F

Fixe Normschienenklemme



3

Vertikale Normschienenklemme



3DR  
3TX

Vertikale Normschienenklemme 2-fach



1  
1F  
1C  
1V

Fixe / Universelle Rundrohrklemme



13

Adapter für Mindray Deckenstativ



17

Adapter für Amico Deckenstativ



10

Adapter für Maquet Anästhesiegeräte



9

Adapter für Löwenstein Medical Anästhesiegeräte




4U

Adapter für Anästhesiegeräte bei vorhandenem Seitenkanal


# Höhenverstellbarer Tragarm

## Technische Daten

### SEITENANSICHT

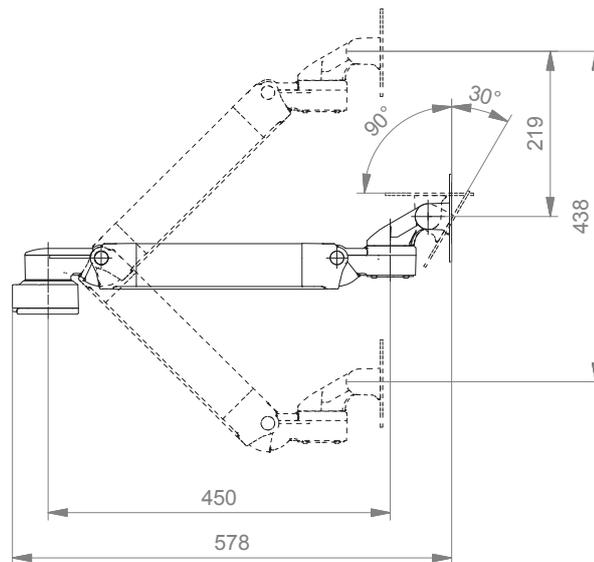

### DRAUFSICHT

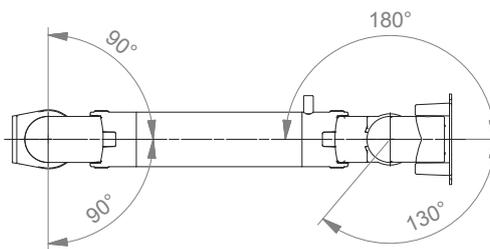

# Höhenverstellbarer Dreigelenkarm



<b>Monitoraufnahme</b>	VESA 75/100
<b>Höhenverstellung</b>	Mittels langsam ausfahrender Druckfeder
<b>Farbauswahl</b>	Kunststoffteile RAL 5013 kobaltblau / RAL 7024 graphitgrau Aluminiumteile RAL 9016 verkehrsweiß / RAL 9002 grauweiß
<b>Max. Zuladung Tragarm</b>	22 kg
<b>Max. Zuladung Monitoraufnahme</b>	18 kg
<b>Eigengewicht</b>	5,5 kg
<b>Gewichtsausgeglichener Bereich</b>	600 N (2-5 kg); 950 N (4-9 kg); 1300 N (7,5-13 kg); 1750 N (13-16 kg); 2200 N (16-22 kg)
<b>Artikelnummer</b>	A-73130G-Y.CD_X VESA 75/100 A-73130GS-Y.CD_X VESA 75/100 drehbar

## Befestigungsmöglichkeiten

Y | Details Seite 29 und 30



4V

Adapter für vertikalen Wandkanal



2F

Fixe Normschienenklemme



3

Vertikale Normschienenklemme



3DR  
3TX

Vertikale Normschienenklemme 2-fach



1  
1F  
1C  
1V

Fixe / Universelle Rundrohrklemme



13

Adapter für Mindray Deckenstativ



17

Adapter für Amico Deckenstativ



10

Adapter für Maquet Anästhesiegeräte



9

Adapter für Löwenstein Medical Anästhesiegeräte




4U

Adapter für Anästhesiegeräte bei vorhandenem Seitenkanal


# Höhenverstellbarer Dreigelenkarm

## Technische Daten


### SEITENANSICHT

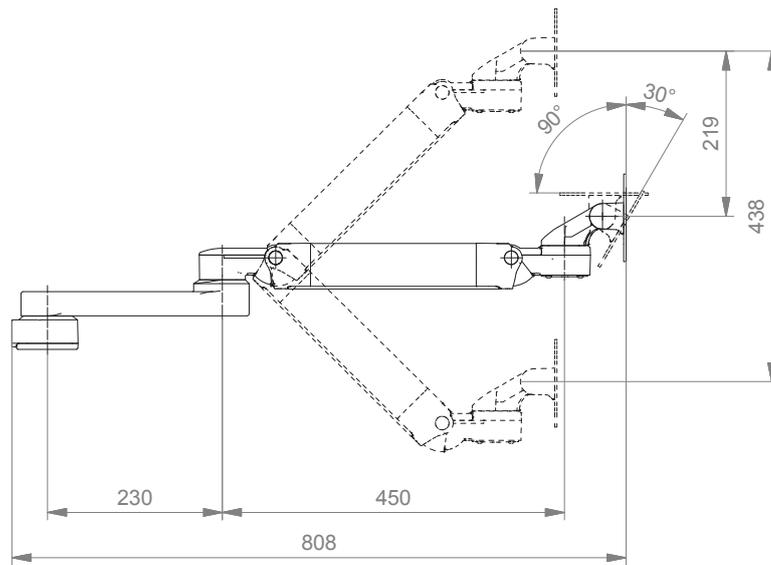

### DRAUFSICHT

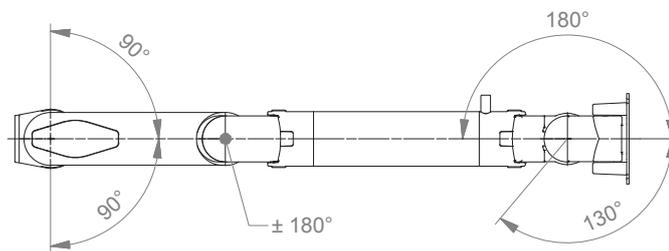

# Höhenverstellbarer Tragarm für hohe Montageposition

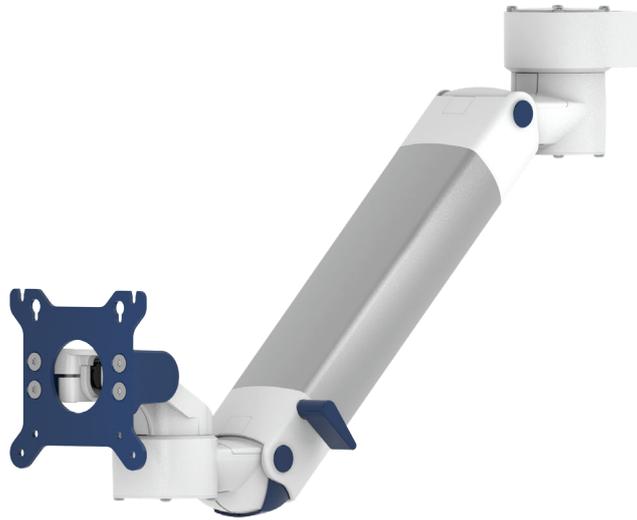

<b>Monitoraufnahme</b>	VESA 75/100	
<b>Höhenverstellung</b>	Mittels langsam ausfahrender Druckfeder	
<b>Farbauswahl</b>	Kunststoffteile	RAL 5013 kobaltblau / RAL 7024 graphitgrau
	Aluminiumteile	RAL 9016 verkehrsweiß / RAL 9002 grauweiß
<b>Max. Zuladung Tragarm</b>	22 kg	
<b>Max. Zuladung Monitoraufnahme</b>	18 kg	
<b>Eigengewicht</b>	3,6 kg	
<b>Gewichtsausgeglichener Bereich</b>	600 N (2-5 kg); 950 N (4-9 kg); 1300 N (7,5-13 kg); 1750 N (13-16 kg); 2200 N (16-22 kg)	
<b>Artikelnummer</b>	A-531G-Y.CD_X	VESA 75/100
	A-531GS-Y.CD_X	VESA 75/100 drehbar

## Befestigungsmöglichkeiten

Y | Details Seite 29



4U

Adapter für vertikalen Wandkanal



3

Vertikale Normschielenklemme



3DR  
3TX

Vertikale Normschielenklemme 2-fach



1  
1F  
1C  
1V

Fixe / Universelle Rundrohrklemme



13

Adapter für Mindray Deckenstativ




17

Adapter für Amico Deckenstativ


# Höhenverstellbarer Tragarm für hohe Montageposition

## Technische Daten


### SEITENANSICHT

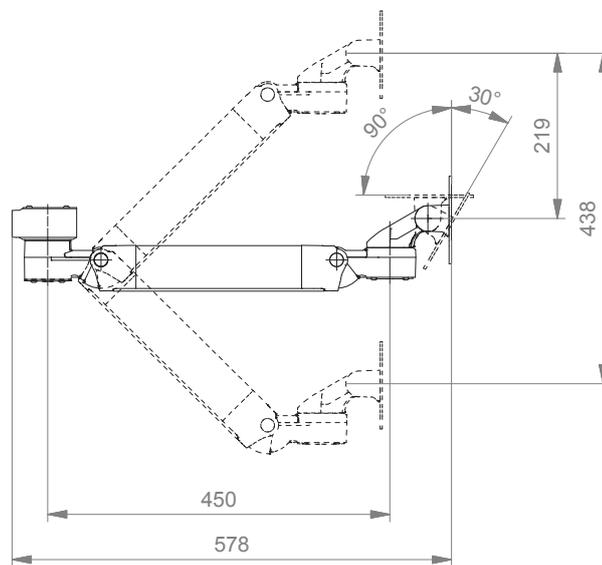

### DRAUFSICHT

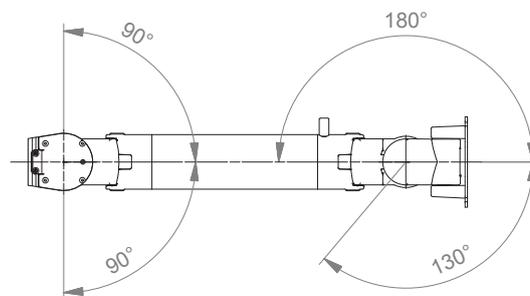

# Höhenverstellbarer Dreigelenkarm für hohe Montageposition

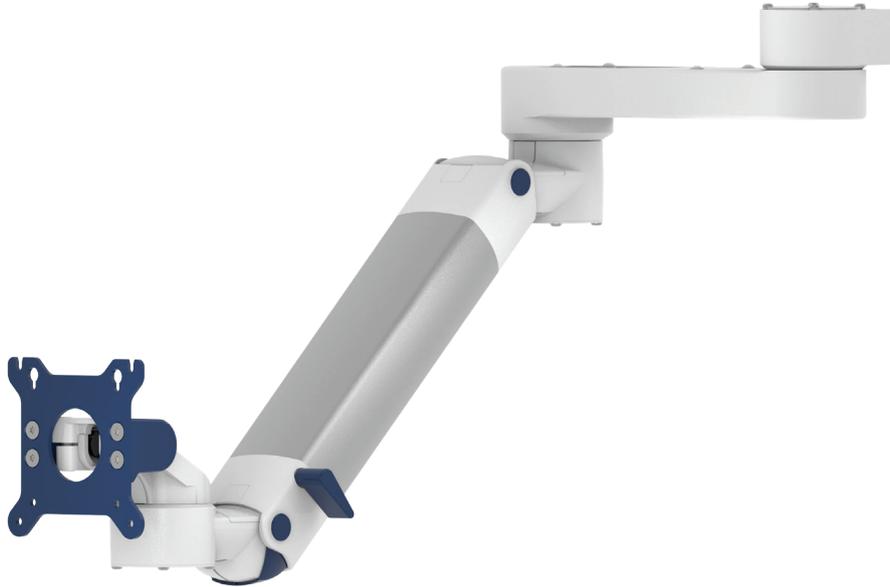

<b>Monitoraufnahme</b>	VESA 75/100	
<b>Höhenverstellung</b>	Mittels langsam ausfahrender Druckfeder	
<b>Farbauswahl</b>	Kunststoffteile	RAL 5013 kobaltblau / RAL 7024 graphitgrau
	Aluminiumteile	RAL 9016 verkehrsweiß / RAL 9002 grauweiß
<b>Max. Zuladung Tragarm</b>	22 kg	
<b>Max. Zuladung Monitoraufnahme</b>	18 kg	
<b>Eigengewicht</b>	5,5 kg	
<b>Gewichtsausgeglichener Bereich</b>	600 N (2-5 kg); 950 N (4-9 kg); 1300 N (7,5-13 kg); 1750 N (13-16 kg); 2200 N (16-22 kg)	
<b>Artikelnummer</b>	A-83130G-Y.CD_X	VESA 75/100
	A-83130GS-Y.CD_X	VESA 75/100 drehbar

## Befestigungsmöglichkeiten

Y | Details Seite 29



4U

Adapter für vertikalen Wandkanal



3

Vertikale Normschienenklemme



3DR  
3TX

Vertikale Normschienenklemme 2-fach



1  
1F  
1C  
1V

Fixe / Universelle Rundrohrklemme



13

Adapter für Mindray Deckenstativ




17

Adapter für Amico Deckenstativ


# Höhenverstellbarer Dreigelenkarm für hohe Montageposition

## Technische Daten

### SEITENANSICHT

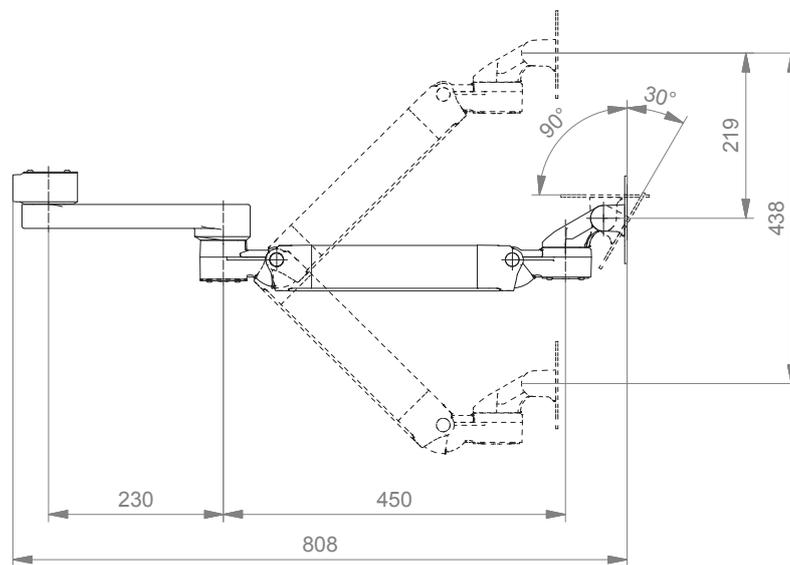

### DRAUFSICHT

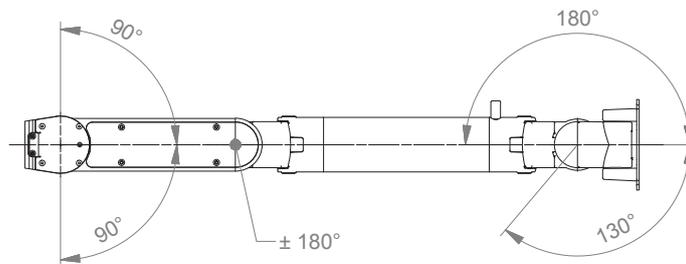

# Tischträger




<b>Monitoraufnahme</b>	VESA 75/100
<b>Farbauswahl</b>	Kunststoffteile RAL 5013 kobaltblau / RAL 7024 graphitgrau Aluminiumteile RAL 9016 verkehrsweiß / RAL 9002 grauweiß
<b>Max. Zuladung Monitoraufnahme</b>	18 kg
<b>Artikelnummer</b>	Tischträger mit Bodenplatte zum Verschrauben auf Tisch- oder Ablagefläche
	T-HG-60.CD_220 Höhe 220 mm
	T-HG-60.CD_280 Höhe 280 mm
	T-HG-60.CD_340 Höhe 340 mm
	Tischträger freistehend (siehe Abb.)
	T-HG-62.CD_220 Höhe 220 mm
	T-HG-62.CD_280 Höhe 280 mm
	T-HG-62.CD_340 Höhe 340 mm
	Tischträger ohne Bodenplatte
	T-HG-69.CD_220 Höhe 220 mm
	T-HG-69.CD_280 Höhe 280 mm
	T-HG-69.CD_340 Höhe 340 mm

**!** Alle freistehenden Tischträger müssen in Abhängigkeit des Monitorgewichts auf Kippstabilität getestet werden!


# Tischträger

Technische Daten - Freistehend

SEITENANSICHT

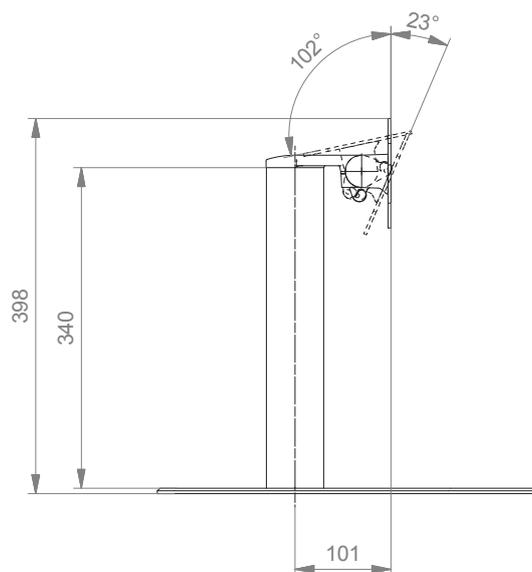

DRAUFSICHT

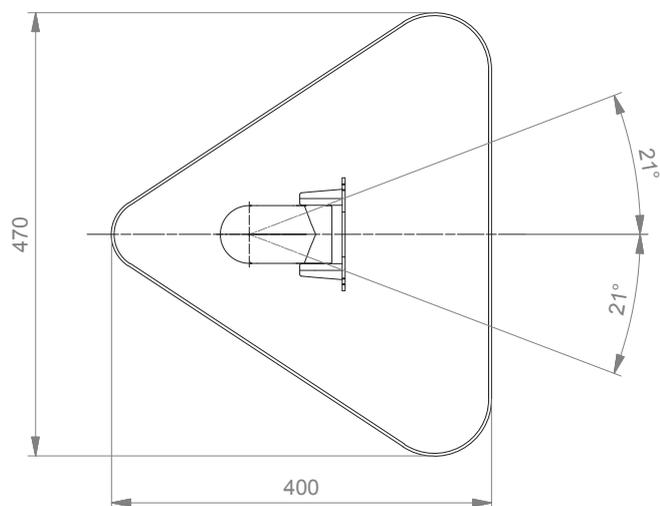

## Tischträger für tiefe Bildschirme



<b>Monitoraufnahme</b>	CL-Bügel, VESA 75/100
<b>Farbauswahl</b>	Kunststoffteile RAL 5013 kobaltblau / RAL 7024 graphitgrau Aluminiumteile RAL 9016 verkehrsweiß / RAL 9002 grauweiß
<b>Max. Zuladung Monitoraufnahme</b>	18 kg
<b>Artikelnummer</b>	Tischträger mit Bodenplatte zum Verschrauben auf Tisch- oder Ablagefläche (siehe Abb.) T-HK-60.CD_50  Tischträger freistehend T-HK-62.CD_50




Alle freistehenden Tischträger müssen  
in Abhängigkeit des Monitorgewichts  
auf Kippstabilität getestet werden!


# Tischträger für tiefe Bildschirme

Technische Daten - mit Bodenplatte

SEITENANSICHT

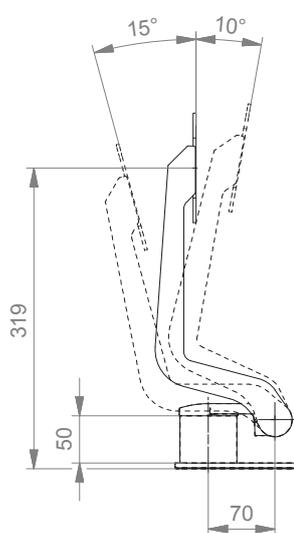

DRAUFSICHT

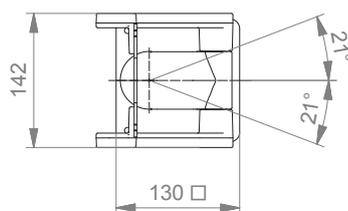

## Rollständer Light Duty




<b>Monitoraufnahme</b>	CL-Bügel, VESA 75/100	
<b>Ausstattung</b>	5-Stern Fußkreuz aus Aluminium inkl. Gegengewicht Doppel-Lenkrollen, $\varnothing$ 100 mm, 2 feststellbar Säule zur Aufnahme von Komponenten und Zubehör	
<b>Farbauswahl</b>	Kunststoffteile	RAL 5013 kobaltblau / RAL 7024 graphitgrau
	Fußkreuz	RAL 9016 verkehrsweiß (Art. Nr. 1) / RAL 5013 kobaltblau (Art. Nr. 6)
<b>Max. Gewichtsbelastung</b>	10 kg	
<b>Optionales Zubehör</b>	Großer Korb 300 x 200 x 180 mm; kleiner Korb 200 x 150 x 100 mm Griff	
<b>Artikelnummer</b>	Rollständer	R-002K.CD
	Korb groß	Z-51-4Z
	Korb klein	Z-52-4Z
	Griff	Z-HD-4.e1

# Rollständer Light Duty


## Technische Daten

---

### SEITENANSICHT

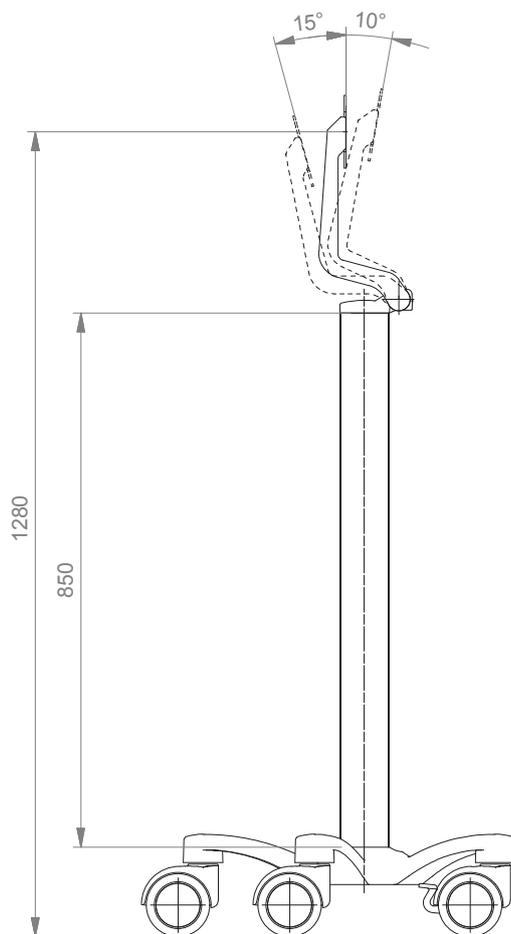

### DRAUFSICHT

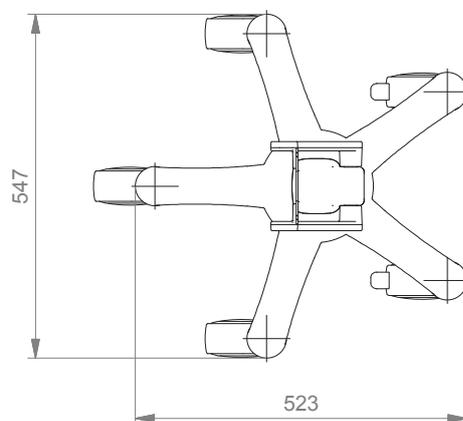

## Befestigungsmöglichkeiten

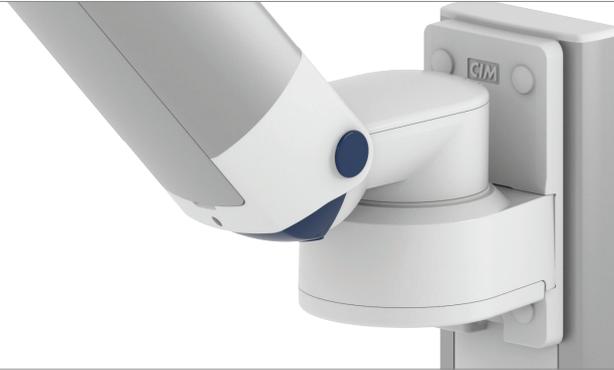


Abbildung	Bezeichnung	Anmerkungen	Art. Nr.
	Adapter für vertikalen Wandkanal	Zur Aufnahme an den CIM Wandkanal (kompatibel mit GCX) Für Tragarme für hohe Montagepositionen Bitte separat bestellen: CIM Wandkanal, siehe Katalog Zubehör	4V 4U
	Fixe Normschiene klemme	Zur Aufnahme an der Normschiene 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm	2F
	Vertikale Normschiene klemme	Zur Aufnahme an einer vertikalen Normschiene 10 x 25 mm	3
	Vertikale Normschiene klemme 2-fach	Zur Aufnahme an 2 vertikalen Normschiene 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm Abstand der Normschiene 150 mm, z.B. Dräger Deckenstativ Abstand der Normschiene 225 mm, z.B. Trilux Deckenstativ	3DR 3TX
	Fixe Rundrohrklemme	Zur Aufnahme an Rundrohr $\varnothing$ 25 mm Zur Aufnahme an Rundrohr $\varnothing$ 35 mm Zur Aufnahme an Rundrohr $\varnothing$ 38 mm	1 1F 1C
	Universelle Rundrohrklemme	V-Flansch zur Aufnahme an Rundrohr $\varnothing$ 23 - 40 mm	1V
	Adapter Deckenstativ	Für Mindray Deckenstativ	13
	Adapter Deckenstativ	Für Amico Deckenstativ	17

## Befestigungsmöglichkeiten für Anästhesiegeräte

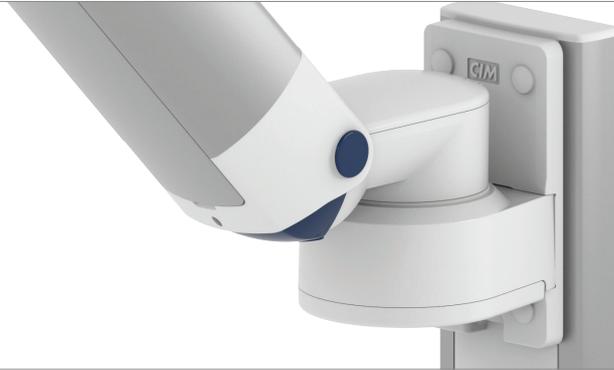


Abbildung	Bezeichnung	Anmerkungen	Art. Nr.
	Adapter für Maquet Anästhesiegeräte	Konusadapter für Maquet FLOW i	10
	Adapter für Löwenstein Medical Anästhesiegeräte	Adapter für Leon / Leon plus	9
	Adapter für Anästhesiegeräte (alle Hersteller)	H 80 mm Bei vorhandenem Seitenkanal (Baugleich mit CIM Wandkanal und GCX)	4U
Wenn kein Seitenkanal vorhanden ist, bitte bestellen Sie folgende Seitenadapter zusätzlich zu 4U:			
	Adapter für Dräger	Dräger Primus / Julian / Cato / Fabius GS / Zeus Seitenadapter L 127 mm Seitenadapter L 320 mm	DR-J01 DR-J02
	Adapter für GE	GE Avance / Aespire / Aestiva Seitenadapter L 200 mm	DX-AES-01



CIM med GmbH

Euro-Industriepark  
Margot-Kalinke-Str. 9  
80939 München

T +49 89. 978 94 08-0

F +49 89. 978 94 08-29

M [info@cim-med.com](mailto:info@cim-med.com)

[www.cim-med.com](http://www.cim-med.com)

