

Rollständer Light Duty Xprezzon Display

MD

Konfigurationsbeispiel



Monitoraufnahme

CL-Bügel, VESA 75/100

Ausstattung

5-Stern Fußkreuz aus Aluminium inkl. Gegengewicht
Doppel-Lenkrollen, ø 100 mm, 2 feststellbar
Säule zur Aufnahme von Komponenten und Zubehör

Farbauswahl **CD**

Dekorative Teile RAL 5013 kobaltblau / RAL 7024 graphitgrau
Fußkreuz RAL 9016 verkehrsweiß
Griffbügel RAL 9016 verkehrsweiß / RAL 5013 kobaltblau / RAL 7024 graphitgrau

Max. Gewichtsbelastung

10 kg

Optionales Zubehör

Großer Korb 300 x 200 x 180 mm; kleiner Korb 200 x 150 x 100 mm
Griff


Artikelnummer

R-002K.**CD** Rollständer
Z-51-4Z.1 Korb groß
Z-52-4Z.1 Korb klein
Z-HD-4.**C1** Griff


Rollständer Light Duty Xprezzon Display

Technische Daten

SEITENANSICHT

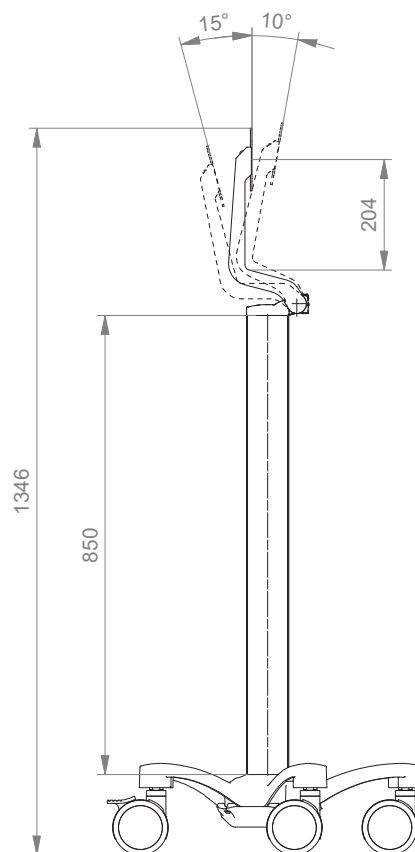

DRAUFSICHT

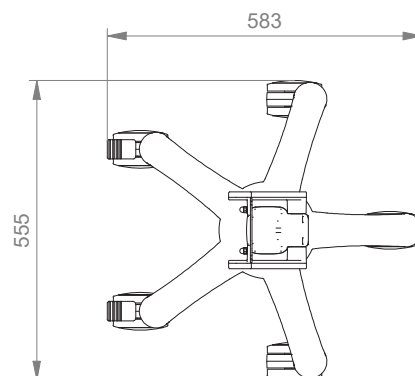

Erstellen von Artikelnummern

Bitte gehen Sie bei der Konfiguration der Artikelnummern wie folgt vor:

Alle Buchstaben in grün bitte mit dem entsprechenden Artikelnummern-Code ersetzen.

1. Komponentenerdung:

S	=	Nicht geerdet
A	=	Geerdet

2. Wählen Sie die gewünschte Tragarmvariante aus:

910G	=	Flush Mount Xprezzon Display
224G / 230G	=	Tragarm Pivot Xprezzon Display
224SLX / 230SLX	=	Tragarm Pivot Xprezzon Backpack
431G	=	Höhenverstellbarer Tragarm Xprezzon Display
431SLX	=	Höhenverstellbarer Tragarm Xprezzon Backpack
73130G	=	Höhenverstellbarer Dreigelenkarm Xprezzon Display
73130SLX	=	Höhenverstellbarer Dreigelenkarm Xprezzon Backpack
531G	=	Höhenverstellbarer Tragarm für hohe Montageposition Xprezzon Display
531SLX	=	Höhenverstellbarer Tragarm für hohe Montageposition Xprezzon Backpack
83130G	=	Höhenverstellbarer Dreigelenkarm für hohe Montageposition Xprezzon Display
83130SLX	=	Höhenverstellbarer Dreigelenkarm für hohe Montageposition Xprezzon Backpack

3. Spezifizieren Sie die Anbindung - wo wollen Sie Ihre Halterung befestigen (Y):

1V	=	Rundrohr ø 23 - 40 mm
1	=	Rundrohr ø 25 mm
1B	=	Rundrohr ø 30 mm
1F	=	Rundrohr ø 35 mm
1C	=	Rundrohr ø 38 mm
2F	=	Horizontale Normschiene 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm
3	=	Vertikale Normschiene 10 x 25 mm
4S	=	Vertikaler Wandkanal
9	=	Löwenstein Medical / ITD / Montageschienen
13	=	Mindray Deckenstative
17	=	Amico Deckenstative
19	=	Dräger Ambia Deckenstative

Erstellen von Artikelnummern

4. Wählen Sie die Farbe der dekorativen Teile (C):

gr = RAL 7024 (graphitgrau)
bl = RAL 5013 (kobaltblau)

5. Wählen Sie die Farbe der Aluminiumdruckgussteile (D):

1 = RAL 9016 (verkehrsweiß)
2 = RAL 9002 (grauweiß)

6. Spezifizieren Sie die Federstärke gem. des Monitorgewichts - nur bei höhenverstellbaren Armen (X):

95 = 4 - 9 kg (Xprezzon Display)
175 = 13 - 16 kg (Xprezzon Backpack)

Beispiel

01 Erdung		02 Armtyp		03 Adaption		04 & 05 Farbe		06 Federstärke
A	-	431SLX	-	Y	.	CD	—	X
A	-	431SLX	-	4S	.	gr1	—	95

Allgemeine Hinweise

Backpack-Lösung Xprezzon

Für die Backpack-Lösung wird eine gewichtszentrierte VESA Montageplatte geliefert. Dies ermöglicht eine leichtgängige Bedienung der Neigefunktion. Somit ist eine anwenderfreundliche Neigungsverstellung und sichere Handhabung gewährleistet.

Bitte bestellen Sie das "O" Bracket für die Verbindung von Monitor und Display separat bei Spacelabs (Spacelabs Art. Nr. 016-0899-00).

Komponentenerdung

Alle Tragarme mit integrierter Kabelführung sind mit einer **Komponentenerdung** versehen. Bei externer oder teilintegrierter Kabelführung, bei der keine Kabel durch die Gelenke geführt werden, kann auf die Komponentenerdung verzichtet werden.

Gewichtsbelastung

Alle **höhenverstellbaren** Tragarme haben eine maximale Gewichtsbelastung von 22 kg. Bei rückseitigen Adaptionen und bodenseitigen Anbindungen mittels der 5" Montageplatte darf das Monitorgewicht maximal 18 kg betragen. Weitere 4 kg können beispielsweise über einen Down Post unterhalb des vorderen Drehgelenks befestigt werden. Je nach Material und dessen Bruchdehnung haben alle Gewichtsangaben einen 4- bzw. 6-fachen Sicherheitsfaktor gemäß den Regularien IEC 60601-1.

Sonderlösungen und Anwendungen im Kernspinbereich/ MRI

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie **kundenspezifische** Lösungen suchen.

Produktkennzeichnung

Alle als Medizinprodukte der Klasse 1 deklarierten Produkte sind CE gekennzeichnet. Als **Medizinprodukt der Risikoklasse 1** entsprechen sie den Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) und sind konform mit den Regularien IEC 60601-1. Andere Normen der IEC 60601-Reihe gelten unabhängig von ihrer Version nicht für unsere Produkte.

MD Funktional eigenständiges Produkt, welches bereits vor Integration in ein Gesamtgerät als Medizinprodukt in die Klasse 1 eingeordnet wird. Das Produkt ist mit CE-Kennzeichnung versehen. Eine Konformitätserklärung ist vorhanden.

MD Zubehör oder Ersatzteile, die keine eigenständige Funktion haben und somit nicht der MDR unterliegen. Eine Konformitätserklärung oder CE-Kennzeichnung dieser Produkte ist daher nicht erforderlich.

Gewährleistung

Alle CIM Produkte haben ab Lieferdatum eine 5-jährige Gewährleistung auf Material und Funktionsfähigkeit.

Wie finden Sie das passende Produkt für Ihren Bedarf?

Ganz einfach mit unserem Konfigurator

<https://cim-configurator.com>

