

## Support sur table pour écrans profonds

MD



### Plaque de fixation du moniteur

Coloris disponibles **CD**

### Charge max. de la platine de fixation du moniteur

### Numéro d'article

Support CL, plaque de base à déploiement rapide

Pièces décoratives RAL 5013 bleu cobalt / RAL 7024 gris graphite  
Pièces en aluminium RAL 9016 blanc signalisation / RAL 9002 blanc gris

18 kg / 39,7 livres

Support sur table avec plaque de fond à visser  
sur une table ou étagère (voir l'illustration)  
T-HKQ-60.**CD**\_50

Support de table indépendant  
T-HKQ-62.**CD**\_50

Plaque d'adaptation à déploiement rapide  
Z-QR-C.**D** VESA 75  
Z-QR-G.**D** VESA 75/100




Tous les supports de table indépendants  
doivent être testés en fonction du poids  
du moniteur pour leur stabilité!


# Support sur table pour écrans profonds

Données techniques - avec plaque de base

VUE LATÉRALE

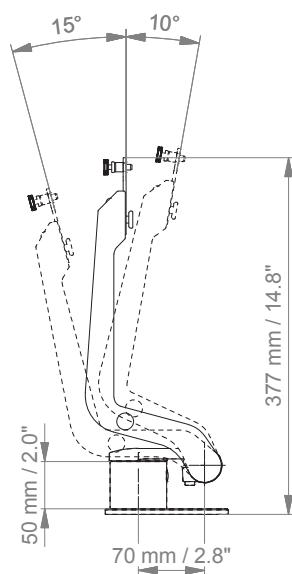

VUE DE DESSUS

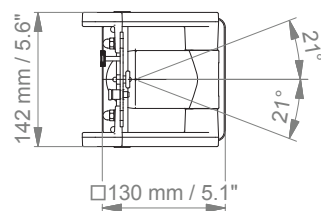

## Adaptateur pour déploiement rapide de plaque VESA

### VESA 75 Plaque d'adaptation à déploiement rapide (Z-QR-C.D)

La plaque d'adaptation illustrée est montée à l'arrière du moniteur, sur le modèle de trou 75 x 75 mm (2,9 x 2,9"). La plaque d'adaptation doit être commandée séparément.

Poids du produit : 0,2 kg / 0,4 lbs





### VESA 75 Plaque d'adaptation à déploiement rapide (Z-QR-G.D)

La plaque d'adaptation illustrée est montée à l'arrière du moniteur à l'aide de l'une des deux plaques de 75 x 75 mm (2,9 x 2,9") ou 100 x 100 mm (3,9 x 3,9") dimension du trou.

La plaque d'adaptation à déploiement rapide doit être commandée séparément.

Poids du produit : 0,2 kg / 0,4 lbs

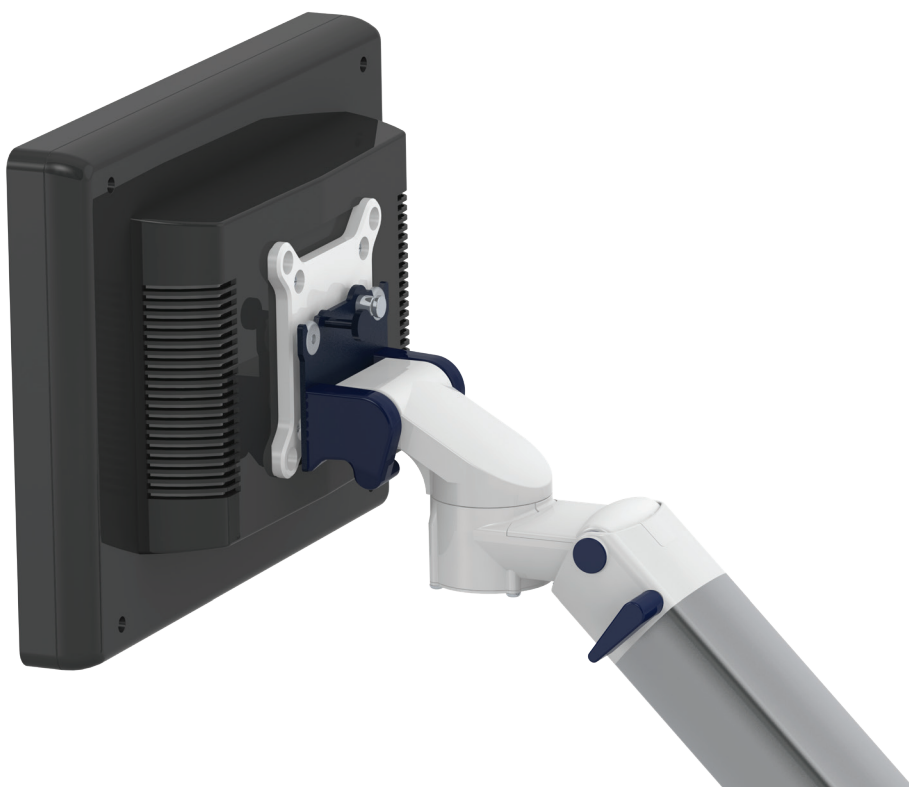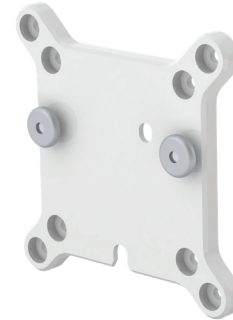

# Comment créer des numéros d'article

Les numéros de pièce sont facilement créés en suivant les étapes ci-dessous :

Veillez remplacer, selon vos besoins, les lettres en **vert** par le code du numéro d'article.

## 1. Mise à la terre des composants :

S	=	non mis à la terre
A	=	mis à la terre

## 2. Choisissez la version de bras souhaitée :

910Q	=	fixation directe
224Q / 230Q	=	bras pivotant
33030Q	=	double bras pivotant pour applications légères
H33030Q	=	double bras pivotant pour applications lourdes
431Q	=	bras réglable en hauteur
73130Q	=	double bras réglable en hauteur
531Q	=	bras réglable en hauteur pour montage en position haute
83130Q	=	double bras réglable en hauteur pour montage en position haute

## 3. Indiquez où vous souhaitez monter le bras et sélectionnez sa fixation (Y) :

1V	=	tube rond $\varnothing$ 23 - 40 mm / 0,9 - 1,6"
1	=	tube rond $\varnothing$ 25 mm / 1,0"
1B	=	tube rond $\varnothing$ 30 mm / 1,2"
1F	=	tube rond $\varnothing$ 35 mm / 1,4"
1C	=	tube rond $\varnothing$ 38 mm / 1,5"
2F	=	rails normalisés horizontaux 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm
3	=	rails normalisés verticale 10 x 25 mm
4S	=	glissière murale verticale
9	=	Löwenstein Medical / ITD / glissière murale
13	=	unités d'alimentation médicale Mindray
17	=	télécommandes et panneaux muraux Amico
19	=	télécommandes et panneaux muraux Dräger Ambia

## Comment créer des numéros d'article

### 4. Choisissez le coloris souhaité pour les pièces décoratives (C) :

gr	=	RAL 7024 (gris graphite)
bl	=	RAL 5013 (bleu cobalt)

### 5. Choisissez le coloris souhaité pour les pièces en aluminium coulé sous pression (D) :

1	=	RAL 9016 (blanc signalisation)
2	=	RAL 9002 (blanc gris)

### 6. Précisez la tension de ressort en fonction du poids de votre moniteur/appareil - uniquement avec les bras réglables en hauteur (X) :

60	=	2 - 5 kg / 4,4 - 11 livres
95	=	4 - 9 kg / 8,8 - 19,8 livres
110	=	4,5 - 12,5 kg / 9,9 - 27,6 livres
130	=	7,5 - 13 kg / 16,5 - 28,7 livres
160	=	12,5 - 19 kg / 27,6 - 41,9 livres
175	=	13 - 16 kg / 28,7 - 35,3 livres
220	=	16 - 22 kg / 35,3 - 48,5 livres

## Exemple

01 Mise à la terre	02 Version de bras	03 Fixation	04 & 05 Coloris	06 Tension de ressort
A	- 431Q	- Y	. CD	- X
A	- 431Q	- 4S	. gr1	- 95

## Remarques générales

### Plaques de fixation de moniteur

Le déploiement rapide du moniteur avec sa plaque d'adaptation pour VESA 75/75 (réf. no. Z-QR-C) ou VESA 75/100 (réf. no. Z-QR-G) permet un changement rapide de moniteur. Veuillez noter que la plaque d'adaptation à déploiement rapide doit être commandée séparément. Les solutions de montage pour les moniteurs avec VESA 75/100 sans déploiement rapide peuvent être trouvées dans notre catalogue VESA 75/100 adaptation.

### Mise à la terre des composants

Tous les bras dotés d'une gestion des câbles intégrée sont équipés d'une **mise à la terre des composants**. Aucune mise à la terre n'est requise pour les bras ayant une gestion des câbles externe ou semi-intégrée, dont les câbles ne passent pas par des articulations.

### Charge de poids admissible

Tous les **bras réglables en hauteur** ont une charge de poids admissible de 22 kg/48,5 livres. Les adaptations pour moniteurs à montage arrière et les plaques plongeantes 5" montées à l'horizontale acceptent un poids de moniteur maximal de 18 kg/39,7 livres. Une charge additionnelle de 4 kg/8,8 livres peut être montée sur un montant descendant, sous la partie rotative avant. Selon le matériel et le facteur de résistance, toutes les indications de poids ont un facteur de sécurité de 4 et/ou 6 fois supérieur conformément à la réglementation NF 60601-1.

### Des solutions personnalisées et des applications IRM

Veuillez nous contacter pour des solutions **personnalisées**.

### Marquage des produits

Tous les produits déclarés comme dispositifs médicaux de classe 1 portent le marquage CE. En tant que **dispositif médical de la classe de risque 1**, nos produits sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2017/745 (MDR) ainsi qu'à la norme IEC 60601-1. Les autres normes de la série IEC 60601 ne s'appliquent pas à nos produits, quelle que soit leur version.

**MD** Un produit autonome qui est déjà classé comme un produit médical de classe 1 avant d'être intégré dans un dispositif médical global. Le produit porte le marquage CE. Une déclaration de conformité est disponible.

**MD** Les accessoires ou pièces détachées qui n'ont pas de fonction indépendante et ne sont donc pas soumis au MDR. Ces produits ne sont pas marqués CE. Une déclaration de conformité n'est pas nécessaire.

### Garantie

Tous les produits CIM sont garantis 5 ans à compter de la date de livraison contre tout défaut de matériel et de fonctionnement.

## Comment trouver les produits adaptés à vos besoins

Aucun problème avec notre configurateur

<https://cim-configurator.com>

