

Support de clavier



Illustration	Description	Longueur (T)	Poids	No.
	Support de clavier magnétique avec fonction de rabat Capacité de charge max : 5 kg / 11 livres	30S : 300 x 210 mm / 11,8 x 8,3" 40S : 400 x 150 mm / 15,8 x 5,9" 50S : 500 x 200 mm / 19,7 x 7,9" 58S : 580 x 200 mm / 22,8 x 7,9" 65S : 650 x 200 mm / 25,6 x 7,9"	2,4 kg / 5,3 livres 2,5 kg / 5,5 livres 2,9 kg / 6,4 livres 3,1 kg / 6,8 livres 3,3 kg / 7,3 livres	Z-EF-Y.CD_T
	Support de clavier avec fonction de rabat et support de souris rétractable gauche/droit Capacité de charge max : 5 kg / 11 livres	RC : 480 x 220 mm / 18,9 x 8,7"	3,5 kg / 7,7 livres	Z-EF-Y.CD_T
	Support de clavier magnétique rétractable et avec fonction de rabat Capacité de charge max : 5 kg / 11 livres	50S : 500 x 200 mm / 19,7 x 7,9" 58S : 580 x 200 mm / 22,8 x 7,9"	3,1 kg / 6,8 livres 3,3 kg / 7,3 livres	Z-ER-Y.CD_T

Coloris disponibles

Pièces décoratives (C)

gr = RAL 7024 (gris graphite)

bl = RAL 5013 (bleu cobalt)

Pièces en aluminium (D)

1 = RAL 9016 (blanc signalisation)

2 = RAL 9002 (gris-blanc)


Fixations Y

détails à la page 2



5

Pince pour rail horizontal

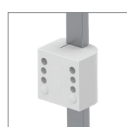

3

Pince pour rail vertical



4S

Adaptateur pour glissière murale verticale



1V

Pince universelle pour tube rond



1

1B

1F

1C

Pince fixe pour tube rond

Fixations Y

pour supports de clavier



Illustration	Description	Remarques	Poids	No.
	Pince fixe pour rail	Pour fixation sur un rail normalisé horizontal 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30 mm	0,4 kg / 0,9 livres	5
	Pince pour rail vertical	Pour fixation sur un rail normalisé vertical 10 x 25 mm	0,5 kg / 1,1 livres	3
	Adaptateur pour glissière murale verticale	Pour montage sur glissière murale CIM (compatible avec glissière GCX)	0,6 kg / 1,3 livres	4S
	Pince universelle pour tube rond	Bride en V pour fixation sur tubes ronds ø 23 - 40 mm / 0,9 - 1,6"	0,6 kg / 1,3 livres	1V
	Pince fixe pour tube rond	Pour montage sur tube rond ø 25 mm / 1" Pour montage sur tube rond ø 30 mm / 1,2" Pour montage sur tube rond ø 35 mm / 1,4" Pour montage sur tube rond ø 38 mm / 1,5"	0,3 kg / 0,7 livres 0,4 kg / 0,9 livres 0,4 kg / 0,9 livres 0,4 kg / 0,9 livres	1 1B 1F 1C

Comment créer des références

Les références sont facilement créées en suivant les étapes ci-dessous :

Veuillez remplacer, selon vos besoins, les lettres en vert par le code de référence.

1. Indiquez où vous souhaitez monter le bras et sélectionnez sa fixation (Y) :

1V	=	tube rond ø 23 - 40 mm / 0,9 - 1,6"
1	=	tube rond ø 25 mm / 1,0"
1B	=	tube rond ø 30 mm / 1,2"
1F	=	tube rond ø 35 mm / 1,4"
1C	=	tube rond ø 38 mm / 1,5"
2F	=	rails horizontaux 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm
3	=	rail vertical 10 x 25 mm
4V	=	glissière murale verticale (uniquement pour les tiroirs)
4Z	=	glissière murale verticale (uniquement pour les accessoires, pas pour les bras supports)
4ZH	=	glissière murale horizontale (uniquement pour les accessoires, pas pour les bras supports)
5	=	rails horizontaux 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30 mm
6H / 6R	=	rails horizontaux 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm
6V	=	rails verticaux 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm
19	=	bras plafonnier Dräger Ambia
70	=	bras non réglable en hauteur
71	=	bras réglables en hauteur

2. Choisissez le coloris souhaité pour les pièces décoratives (C) :

gr	=	RAL 7024 (gris graphite)
bl	=	RAL 5013 (bleu cobalt)
w	=	RAL 9016 (blanc signalisation) uniquement pour les tiroirs, les glissières murales et la poignée pour supports mobiles

3. Choisissez le coloris souhaité pour les pièces en aluminium coulé sous pression (D) :

1	=	RAL 9016 (blanc signalisation)
2	=	RAL 9002 (gris-blanc)

Exemple

Domaine d'application		Type d'accessoire		01 Adaption		02 & 03 Coloris		04 Clavier
Z	-	EF	-	Y	.	CD	-	T
Z	-	EF	-	4S	.	bl1	-	50S

Remarques générales

Des solutions personnalisées et des applications IRM

Veuillez nous contacter pour des solutions **personnalisées**.

Marquage des produits

Tous les produits déclarés comme dispositifs médicaux de classe 1 portent le marquage CE. En tant que **dispositif médical de la classe de risque 1**, nos produits sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2017/745 (MDR) ainsi qu'à la norme IEC 60601-1. Les autres normes de la série IEC 60601 ne s'appliquent pas à nos produits, quelle que soit leur version.

MD Un produit autonome qui est déjà classé comme un produit médical de classe 1 avant d'être intégré dans un dispositif médical global. Le produit porte le marquage CE. Une déclaration de conformité est disponible.

MD Les accessoires ou pièces détachées qui n'ont pas de fonction indépendante et ne sont donc pas soumis au MDR. Ces produits ne sont pas marqués CE. Une déclaration de conformité n'est pas nécessaire.

Garantie

Tous les produits CIM sont garantis 5 ans à compter de la date de livraison contre tout défaut de matériel et de fonctionnement.

Comment trouver les produits adaptés à vos besoins

Aucun problème avec notre configurateur

<https://cim-configurator.com>

